




# Mercury calcagno

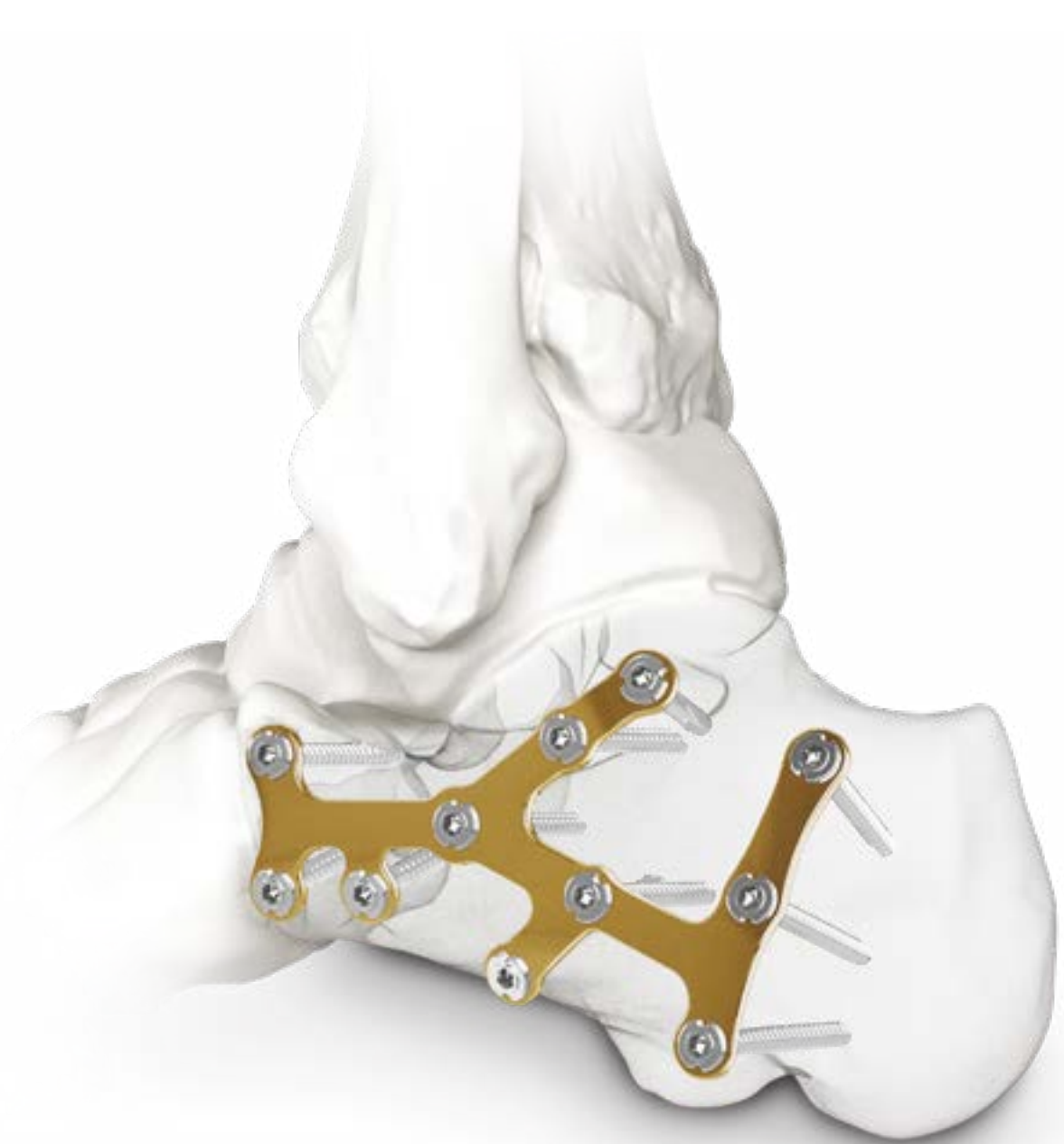

# Mercury - calcagno

Il calcagno è l'osso tarsale più frequentemente fratturato, e tali fratture possono essere generalmente classificate in intra-articolari (70-75%) ed extra-articolari, fratture articolari con affossamento e fratture gravemente comminute.

Una riduzione a cielo aperto e una fissazione interna stabile con una placca laterale è riconosciuta come

terapia standard per trattare fratture intra-articolari.


I supporti calcaneali O'nil, realizzati in titanio, sono a basso profilo per offrire una migliore anatomicità.

Il supporto Mercury O'nil offre una struttura a stabilità angolare studiata per sostenere la superficie articolare del calcagno.



## Benefici e vantaggi

- Il sistema di bloccaggio vite-supporto brevettato permette una tecnica facile ed elimina la possibilità di cross-threading tra la testa della vite e il supporto.
- Il sistema di bloccaggio prevede una fissazione bicorticale.
- Supporti a basso profilo di spessore 1,2 mm per ridurre l'irritazione dei tessuti molli.
- Strumentario semplice ed intuitivo.
- Il supporto Mercury O'nil consente molteplici punti di fissazione per il sostegno dei piccoli frammenti; 11 fori di bloccaggio rendono il supporto adatto alla sintesi di molteplici tipologie di frattura.
- Tutti i supporti O'nil per il calcagno sono in Titanio puro GR.4 - ISO 5832-2

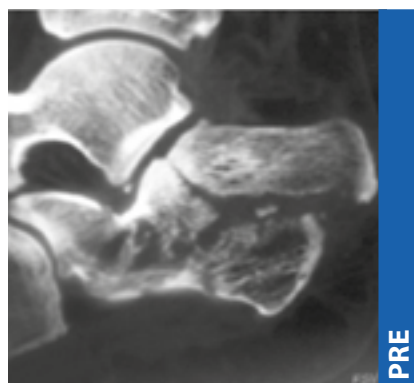

# Informazioni per ordini

Ref.	Supporti	L. mm	Fori epifisi		Fori diafisi	
			Bloccati	Liberi	Bloccati	Liberi
120.7001	MERCURY supp. calcan. (SX)	67	11	0	0	0
120.7002	MERCURY supp. calcan. (DX)	67	11	0	0	0
120.7003	MERCURY supp. calcan. (SX) small	56	11	0	0	0
120.7004	MERCURY supp. calcan. (DX) small	56	11	0	0	0
21.0001	Testa emisferica					

## Materiale

Supporti: Titanio Grado 4 - ISO 5832-2

Viti e bussole: Ti6Al4V - ISO 5832-3



S20 - Cassetta Strumenti Serie MINI - 1 pz.



S21 - Centrapunte Conico Ø2,2mm - 1 pz.



S22 - Punta Ø2,2mm, 160mm - 2 pz.



S213 - Cannula per Filo di K Ø1,2mm - 1 pz.



S214 - Centrapunte Doppio Ø2,2mm Universale - 1 pz.



S215 - Centrapunte Conico Graduato Ø2,2mm - 1 pz.



S33 - Misuratore di Profondità - 1 pz.



S232 - Centratore per Filo di K Ø1,2mm - 1 pz.

S235 - Filo di K Ø1,2mm x 120mm - 2 pz.



S24 - Cacciavite Esagonale 2mm - 1 pz.

## Viti autobloccanti Ø2,5mm



Ref.	L. mm	Ref.	L. mm
120.2508	8	120.2526	26
120.2510	10	120.2528	28
120.2512	12	120.2530	30
120.2514	14	120.2534	34
120.2516	16	120.2538	38
120.2518	18	120.2542	42
120.2520	20	120.2546	46
120.2522	22	120.2550	50
120.2524	24		



S246 - Dispositivo per Compressione per Viti Autobloccanti - 1 pz.



S25 - Portabussole/Estrattore - 1 pz.



SVM - Vite di Stabilizzazione Provvisoria Ø2,5mm - 2 pz.



SET20 - Strumentario completo (Serie Mini)



**Intrauma S.p.A.** - Via Genova, 19 - 10098 Rivoli (TO) Italia  
Tel. +39.011.953.94.96 - Fax +39.011.958.83.85 - [info@intrauma.com](mailto:info@intrauma.com) - [www.intrauma.com](http://www.intrauma.com)



**Dati e immagini**

Intrauma S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche al design e alla finitura dei prodotti mostrati e descritti nel presente catalogo senza preavviso alcuno.

Le immagini sono esempi illustrativi a titolo di informazione.

Le informazioni visualizzate sono puramente indicative circa alcune caratteristiche generali dei prodotti qui illustrati.

Tali informazioni non costituiscono in alcun modo descrizione delle caratteristiche specifiche da parte del Costruttore.

Invitiamo pertanto il cliente a rivolgersi sempre all'azienda Intrauma S.p.A. al fine di ottenere una completa informazione sulle caratteristiche specifiche.

© I contenuti delle pagine del presente catalogo sono protetti da Copyright. La riproduzione dei contenuti è possibile se espressamente autorizzato da Intrauma S.p.A. Non sono consentite la copia e la distribuzione del presente catalogo, senza previa autorizzazione.

